




SINUSET®

FILTRO NASALE SINUSET

Please read this instruction leaflet carefully
[Leggere attentamente questo foglio di istruzioni](#)
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch

INSTRUCTIONS FOR USE - ISTRUZIONI PER L'USO - GEBRAUCHSANLEITUNG

1

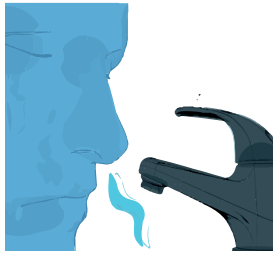


Eng. Wash the nostrils with clear water and dry them carefully out;

Ita. Lavare le narici con acqua pulita e asciugarle con cura;

Deu. Nasenlöcher mit sauberem Wasser reinigen und gut abtrocknen;

2

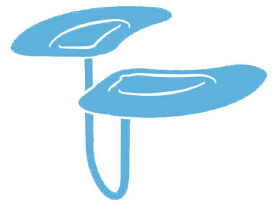

Eng. Assure that the longer part of the filters look downwards when inserting the nose-filter in the nostrils;

Ita. Assicurarsi che la parte più lunga dei filtri sia rivolta verso il basso quando si inserisce il filtro nasale nelle narici;

Deu. Darauf achten, dass der längere Teil der Filter beim Einsetzen in die Nasen-löcher nach unten schaut;

3



Eng. Push the nose-filter gently in order to make it fit perfectly in the nostrils;

Ita. Spingere delicatamente il filtro del naso per adattarlo perfettamente alle narici;

Deu. Darauf achten, dass der längere Teil der Filter beim Einsetzen in die Nasen-löcher nach unten schaut;

4



Eng. Each nose-filter can be used from 2 - 5 days depending of the air pollution where it is exposed. After use place it back into the separate place in the box for reuse in order to avoid dust accumulation or the contamination with the others clean nasal-filters.

This product is not washable.

Ita. Ogni filtro naso può essere utilizzato da 2 a 5 giorni a seconda dell'inquinamento atmosferico in cui è esposto. Dopo l'uso riponetelo nello spazio separato della scatola per il riutilizzo ed evitare l'accumulo di polvere o la contaminazione con gli altri filtri nasali puliti.

Questo prodotto non è lavabile.

Deu. Jeder Nasenfilter kann 2-5 Tage benutzt werden. Tragedauer ist von der Intensität der Luft - verschmutzung abhängig. Nach dem Fang separaten Raum in der Box für die Wiederverwendung verwenden und die Ansammlung von Staub oder Kontamination mit anderen sauberen Nasen Filter vermeiden.

Dieses Produkt ist nicht waschbar.



INSTRUCTION FOR STORAGE
ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE
ANLEITUNG FÜR LAGERUNG

Eng. Keep the nose-filter in a cool place away from sunlight and heat. After use place it back into the separate place in the box for reuse in order to avoid dust accumulation or the contamination with the others clean nasal-filters.

Ita. Tenere il filtro del naso in un luogo fresco lontano dalla luce del sole e dal calore. Dopo l'uso riponetelo nello spazio separato della scatola per il riutilizzo ed evitare l'accumulo di polvere o la contaminazione con gli altri filtri nasali puliti.

Deu. Halten Sie die Nase Filter an einem kühlen Ort, entfernt von Sonnenlicht und Wärme. Nach dem Fang separaten Raum in der Box für die Wiederverwendung verwenden und die Ansammlung von Staub oder Kontamination mit anderen sauberen Nasen Filter vermeiden

INDICATIONS FOR PROTECTION AGAINST UNWANTED EFFECTS
INDICAZIONI PER PROTEZIONE CONTRO EFFETTI INDESIDERATI
INDIKATIONEN FÜR DEN SCHUTZ GEGEN UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Eng. The nose-filter should not be worn on open wounds in order to avoid undesirable effects. Before using the nose-filter, cure the open wounds. Consult your doctor for proper treatment of the open sores in the nostrils.

Ita. Il filtro nasale non deve essere indossato sulle ferite aperte per evitare effetti indesiderati. Prima di utilizzare il filtro del naso, curare le ferite aperte. Consultare il proprio medico per un trattamento adeguato delle infiammazioni aperte nelle narici.

Deu. Der Nasenfilter sollte nicht bei entzündeten oder verletzten Nasenlöchern verwendet werden. Benützung des Nasenfilters erst nach gänzlicher Abheilung. Konsultieren Sie zur Behandlung Ihren Hausarzt.

INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL
ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO
ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Eng. Dispose of the used nose-filter hygienically. The nose-filter is 100% Biodegradable. Throw the waste in the bin for plastic. Do not flush it down the toilet.

Ita. Smaltire in modo igienico il filtro del naso usato. Il filtro nasale è biodegradabile al 100%. Gettare i rifiuti nel contenitore per la plastica. Non gettarli nella toilette.

Deu. Entsorgen Sie die gebrauchten Nasenfilter Hygienisch in der Mülltonne für Kunststoff. Das Produkt ist 100% biologisch abbaubar. Nicht in der Toilette entsorgen.

To be used before of 31.12.2022
Da utilizzare prima del 31.12.2022
Verwendbar bis 31.12.2022

Manufactured in Italy **Prodotto in Italia** Hergestellt in Italien



LEM SRL

Streda de Pareda, 54 - 38032 Canazei (TN)
C.F. e P.IVA: 02460400225 Email: info@sinuset.it
www.sinuset.com